


Bruksanvisning Care III

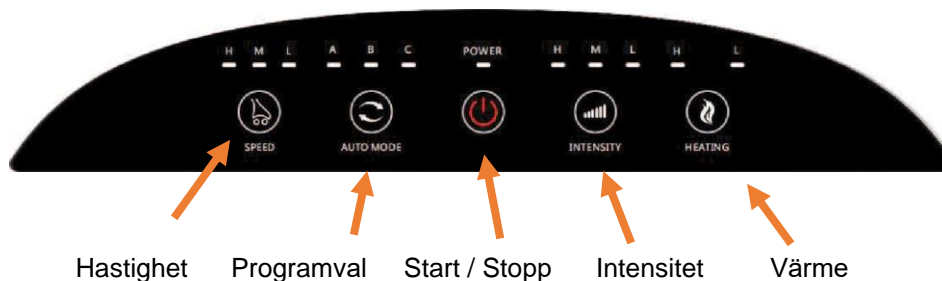

Förberedelse före användning:

- Kontrollera fotmassagens tyg så det är helt (speciellt vid mycket användning)
- Placera fotmassagen på ett avstånd som är bekvämt för dig.
- Se till att fotmassagen står plant på golvet.

Användning

Anslut nätadaptern till ett eluttag.


Tryck på strömknappen  för att slå på fotmassagen.

Tryck på AUTO MODE för att välja och välja massageprogram.

Tryck på HEATING för att aktivera värme.

Tryck på INTENSITY för att välja intensitet.

Tryck på SPEED för att justera hastigheten.

Tryck på strömknappen  för att stänga av fotmassagen.

Funktioner:

- Tre förinställda program som kombinerar knådning, pressning och rullning med olika intensitet av luftryck för att lindra ömhet i dina fötter.
- Luft kompressionsmassage i tre olika nivåer.
- Trippla fotrullar som ger knådande och rullande massage för att släppa ömheten i fotsulan.
- Infraröd värme i två nivåer för främja din blodcirkulation och mjuka upp dina fötter.
- Avtagbart och tvättbart tyg med dragkedja. Kulörtvätt 30°C.
- Touchpanel för att enkelt hantera fotmassagen.
- Säkerhetsfunktion som tömmer luftkuddarna automatiskt om strömmen slås av.

OBS! Stå ej i fotmassagen.